


“Los resultados Sí importan.”



Sistema de Química

VITROS<sup>®</sup> 350

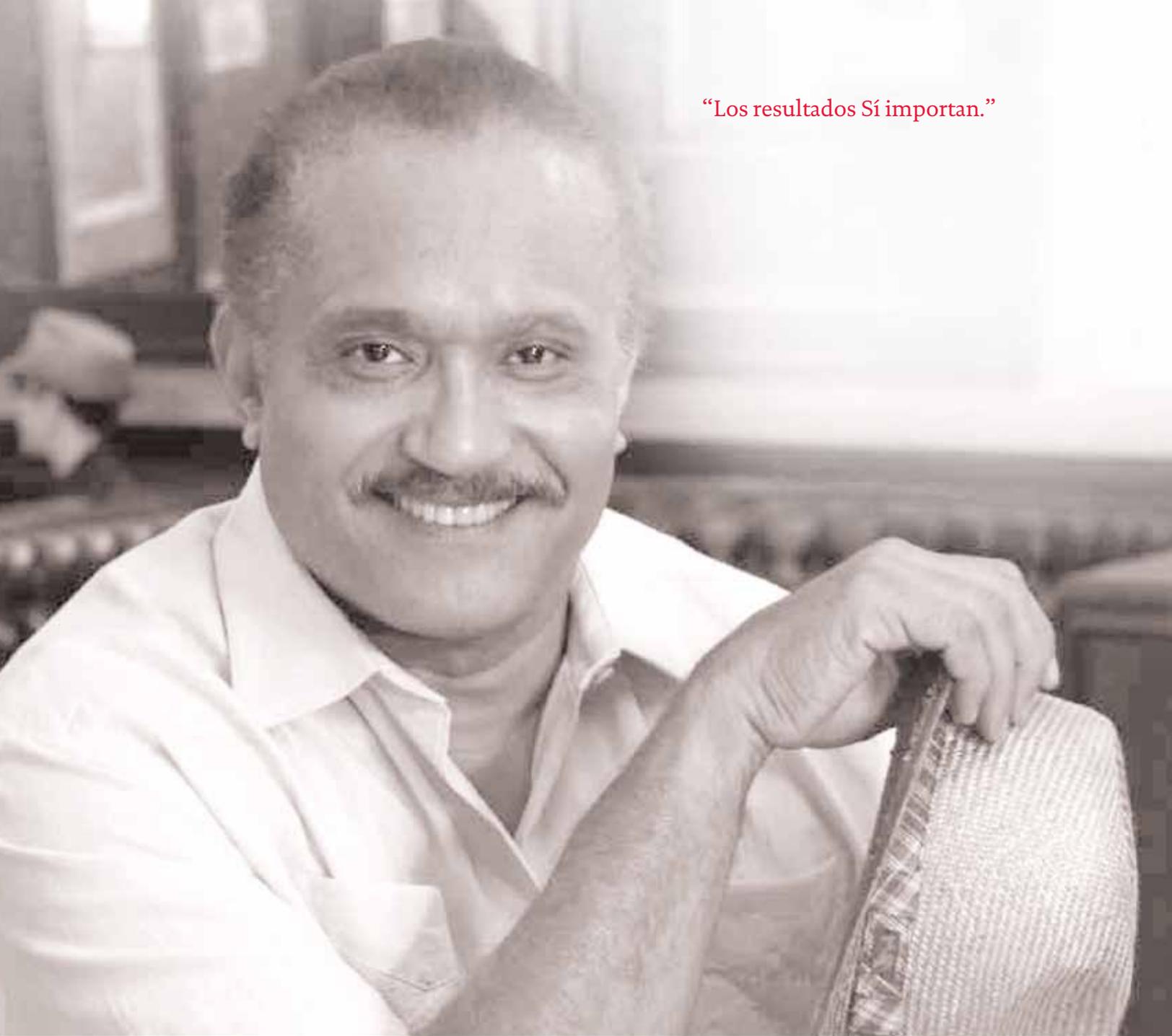

Diseñado para ayudarlo a simplificar y entregar efectivamente resultados que importan a los pacientes que los necesitan.

# Un Sistema Compacto y Poderoso que entrega Grandes Resultados

El Sistema de Química VITROS® 350 ofrece una variedad de importantes beneficios, tales como:

## Seguridad Avanzada

- + Capacidad de procesamiento única de muestras, incluye el uso de puntas individuales descartables, así como detección de coágulos y burbujas para reporte de resultados confiables.
- + Tecnología MicroSlide que minimiza interferencias introduciendo capas que capturan y limpian sustancias interferentes.

## Eficiencia Optimizada

- + Más de 60 posiciones de reactivos a bordo con un amplio menú accesible para entregar resultados inmediatos para pruebas de rutina o de urgencia (STAT).
- + Operación manos libres y procedimientos simples que permiten disponibilidad del personal de laboratorio.

## Costo Efectividad

- + Bajos costos por resultado reportable y alta eficiencia de reactivos sin los costos de preparación, mantenimiento, contaminación por arrastre o interferencias, asociados con sistemas tradicionales basados en agua.
- + Reactivos estandarizados, usando los mismos cartuchos de reactivos en todos los Sistemas VITROS®.

## Principales Características

- + Tecnología VITROS® MicroSlide probada, la cual reduce interferencias.
- + Detección de coágulos, burbujas y un bajo nivel de muestra, ofrece alta precisión.
- + Uso de puntas únicas descartables, eliminando la contaminación cruzada y por arrastre.
- + Verificación continua del proceso, ayudando a garantizar resultados correctos.
- + Tecnología MicroSlide y diluciones a bordo permiten el análisis aleatorio de suero, plasma y orina en cualquier momento.
- + No utiliza tuberías, drenajes, válvulas de purga o agua desionizada, eliminando los grandes costos asociados a sistemas alternativos.
- + Menor costo total con un incremento en la eficiencia de resultados reportables, menores intervenciones, errores y más utilización efectiva del personal.
- + De tamaño pequeño, requiriendo poco espacio y gastos generales.
- + Reactivo listo para su uso inmediato, se carga e inicia el procesamiento. Por la tecnología de MicroSlide y su estabilidad de calibración hasta el cambio del mismo, se traduce en poder realizar operaciones dedicadas a generar valor.
- + De fácil uso y entrenamiento para los usuarios.
- + Rendimiento de hasta 300 resultados por hora.\*

\* Dependiendo del mix de pruebas



MicroSlide

Acetaminofén	Fósforo
Albumina	Potasio
Alcohol	Salicilato
Fosfatasa Alcalina	Sodio
ALT	Teofilina
Amonio	TIBC
Amilasa	Bilirrubina Total
AST	Proteína Total
Bilirrubina BuBc	Triglicéridos
BUN	Ácido Úrico
Calcio	Proteínas en Orina
Carbamazepina	
CO2	
Cloro	
Colesterol	
Colinesterasa	
CK	
CK-MB	
Creatinina	
CRP	
Proteína LCR	
dHDL	
Digoxina	
GGT	
Glucosa	
Hierro	
Lactato	
LDH	
Lipasa	
Litio	
Magnesio	
Fenobarbital	
Fenitoína	

Disponibilidad de productos sujeta a requisitos de Regulación Local.

## Ortho Clinical Diagnostics

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

México: Reg. No. 0637E2005 SSA

Contáctenos en

<http://www.orthoclinical.com/es-ar/Services/TechnicalSupport/Paginas/TechnicalSupport.aspx>

VITROS® *System* 350  
Chemistry

Impreso 02/2014 Distribuido de 02/2014 a 12/2015

©Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. 2014

LAMROCD5390

Todas las marcas son propiedad de Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.